

点滴ポール電源コンセント

IV POLE POWER OUTLETS

LE-550
プラスチック製

点滴ポールへの固定が可能
Can be fastened to an IV pole




特徴 Feature

- 点滴ポールに固定できる電源コンセント。
- コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用
- 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを挿すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
- Power outlet that can be fastened to an IV pole.
- Outlet and plug are JIS T 1021 hospital grade-compliant parts.
- Receptacles are recessed and angled downward to minimize any chance of short-circuiting from seepage of liquid.


仕様	● 材質：本体/ポリカーボネート (PC/ABS)
	● プラグ仕様：医用接地プラグ [JIS T 1021適合品]
	● 差込口：医用接地コンセント4個口(2×2) [JIS T 1021適合品]
用途	● 定格容量：15A・125V(合計1500Wまで)
	● 対応点滴ポール径：φ25.0mm～φ27.0mm
	● 組立て式(要工具：プラスドライバー)
	● 付属品：なべねじM4×10 8本、パイプパッキン、パイプバンド2個
納期	● 点滴ポール
備考	● 標準品・・・納期お問合せください
	● 屋外では使用はしないでください。
	● コードフックとコンセントキャップ(T-CAP2)は別売です。
	● LE-550-5-Green-Whiteは特注品になります。

Specifications	● Material: Main body: Polycarbonate (PC/ABS)
	● Plug specification: Hospital-grade ground plug [JIS T 1021 compliant]
	● Receptacles: Hospital-grade ground outlet, 4 receptacles (2 X 2) [JIS T 1021 compliant]
Specific use Remarks	● Rated capacity: 15A/125V (totalling up to 1500W)
	● Fastenable IV pole diameters: φ25.0mm to φ27.0mm
	● Assembles (requires Phillips screwdriver)
	● Accessories: Eight M4 X 10 round screws, pipe packing, two pipe bands
	● IV poles
	● Do not use outdoors.
	● Cord hook and outlet caps (T-CAP2) sold separately.

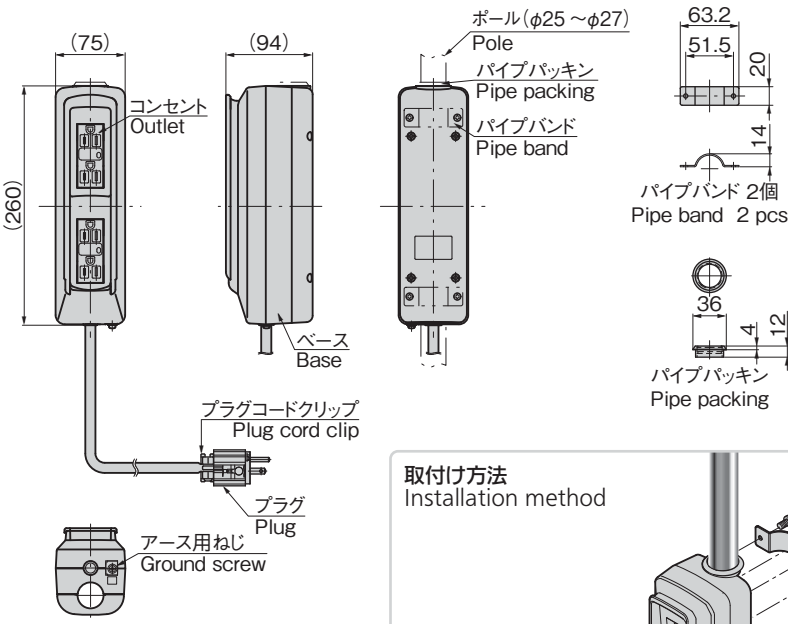

取付け方法
Installation method

ドライバーのみで
取付けられます。
Installs simply with
screwdriver

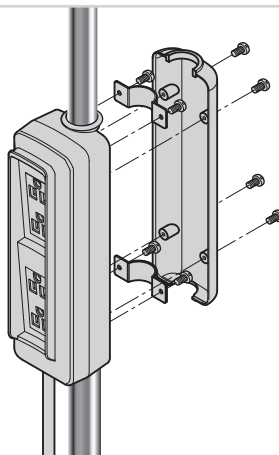

使用例
Example of application



参考動画

点滴ポール周りの整理整頓に！
病院・患者にメリットのある製品を！

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	コード長さ(m) Cord length	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-550-3-White-Pink		本体 Main body	3	1,240	50374
LE-550-5-White-Blue		本体 Main body	5	1,490	50375
LE-550-5-Red-White		本体 非常電源用 Main body For emergency power	5	1,490	50376
LE-550-CF		コードフック Cord hook		155	50377

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

インターロック

電気錠システム

ソレノイドロック

メカニカルロック

OTHER L/LE PRODUCTS

その他のL・LE製品

